



Легке та безпечне застосування Нутрікомп® 500 мл

Для індивідуальних потреб кожного з пацієнтів, готові до застосування

Новий дизайн у пляшці

Для легкого введення ентеральних сумішей

Ентеральне харчування

До нашого асортименту було додано новий тип контейнера Нутрікомп®. Клінічно перевірений Нутрікомп® для зондового харчування тепер доступний у 500 мл HDPE пляшках. Б. Браун пропонує повний набір дієтичних харчових сумішей, що містять поживні речовини, і які відрізняються по харчовому складу і тому адаптовані до індивідуальних потреб пацієнтів.



Зручність у використанні:

- Ергономічна форма з інтегрованим вушком для підвішування на гачок штативу
- Міцна та герметична конструкція пляшки
- Сумісність з системою для насосу Enteroport® plus та гравітаційних систем для харчування
- Прозора мірна шкала полегшує спостереження за введенням харчової суміші
- Той же колірний код, що і у пакетах Нутрікомп®



БЕЗПЕЧНЕ З'ЄДНАННЯ

- Безпечне з'єднання з системами для харчування Б.Браун
- Легко з'єднується з універсальним адаптером та шипом ENPlus
- Призначене як для гравітаційного введення, так і за допомогою насосу



ТОЙ ЖЕ КОЛІРНИЙ КОД

- Той же колірний код, що і для пакетів Нутрікомп®
- Швидка ідентифікація для призначення та його виконання



МІРНА ШКАЛА

- Прозора мірна шкала спостереження на пляшці
- Легкий контроль правильної подачі харчування як у перевернутому, так і у звичайному положенні



ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

- Ергономічна форма для кращої фіксації та конекції
- Полегшений дизайн
- Інтегроване вушко для підвішування на штативі



МІЦНА ТА СТІЙКА

- Надійна міцна пляшка
- Не розіб'ється
- Герметична

Ентеральне харчування з Нутрікомп®

Збалансоване, Адекватне, Різноманітне

Нутрікомп® 500 мл збалансоване зондове харчування- стандартні суміші



Нутрікомп® Стандарт

- Ізокалоричний (1 мл = 1 кКал)
- Містить МСТ та ри�'ячий жир
- Не має Глютену, Лактози та Холестеролу, обмежений рівень Пуринів
- Без харчових волокон



Нутрікомп® НР Енергія


- Гіперкалоричний (1 мл = 1.5 кКал)
- Високий вміст МСТ та ри�'ячого жиру
- Не має Глютену та Холестеролу, обмежено низький рівень Лактози та Пуринів
- Без харчових волокон
- Високий вміст протеїнів

Спеціальні дієтичні суміші



Нутрікомп® Д (Діабет)

- Ізокалоричний (1 мл = 1 кКал)
- Містить МСТ мононенасичені ЖК та ри�'ячий жир
- Багатий антиоксидантами та складними вуглеводами
- Без Глютену, Лактози та Холестерину, обмежений вміст Пуринів, дуже низький рівень Фруктози
- Містить харчові волокна

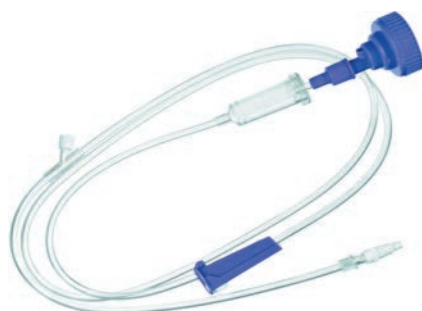

Nutrifix® Universal Adapter ref 9240621

Універсальна система для гравітаційного введення зондового харчування.

- Роликовий зажим та крапельниця
- Безголковий Y-порт для промивання
- Адаптер до пляшки чи пакету
- Підключення до всіх типів мішків, пакетів чи пляшок із широким чи вузьким отвором, шприцами



Infusomat Space Line Adapter ref 8250856SP

Універсальна система для введення зондового харчування за допомогою Infusomat® SPACE (Б.Браун)

- Роликовий зажим та крапельниця
- Безголковий клапанний Y-порт для промивання
- Адаптер до пляшки чи пакету
- Підключення до всіх типів мішків, пакетів чи пляшок із широким чи вузьким отвором, шприцами
- Без ПВХ, Без Фталатів



Enteroport® plus Set Universal Adapter Safety ref 8721744

Універсальна система для введення зондового харчування за допомогою Enteroport®plus (Б.Браун)

- Роликовий зажим та крапельниця
- Безголковий Y-порт для промивання
- Адаптер до пляшки чи пакету
- Підключення до всіх типів мішків, пакетів чи пляшок із широким чи вузьким отвором, шприцами





Універсальний кронштейн для вертикального чи горизонтального монтажу з кроком в 90°
Обертається на 360°

Легке закриття та відкриття із запобіганням ненавмисного відкриття
Звукове підтвердження закриття

Спеціальна касета Enteroport унеможливить невірне підключення системи

Enteroport® plus 230 V; ref: 8710355

Насос для введення зондових сумішей. Адаптований для амбулаторного застосування.

Властивості:

- Мобільний портативний насос
- Швидкість введення: 1 - 400 мл / год
- Точність +/- 10%
- Візуалізація статусу на рідкокристалічному дисплеї
- Акустична та візуальна сигналізація
- Вибір режиму роботи
- Вибір функції пам'яті
- Режим "Безпечний"
- Акумулятори та мережевий адаптер (ref: 8710360)
- Додаткові аксесуари:
 - виклик персоналу (ref: 8721548)
 - кронштейн фіксації (ref: 8721061)

Фіолетовий колір для швидкої ідентифікації ентерального насоса

Підсвічуваний рідкокристалічний дисплей

Інтегровані функції контролю та безпеки:

- Інтегровані функції контролю та безпеки:
- Сенсор повітря
- Датчик оклюзії
- Функція збереження швидкості
- Блокування клавіатури
- Виклик персоналу
- Функція запобігання вільному потоку

Звукова та світлова сигналізація про оклюзію чи повітря в системі



Короткі вказівки 14 мовами

Просте введення параметрів

Режими роботи:

- Тривала швидкість
- Вибір гучності / часу
- Застосування болюса

Напівавтоматична функція заповнення системи та функція перевірки параметрів роботи

Тривалий термін служби батареї (35 год при 200 мл / год) лише 3,5 год. для заряджання

ТОВ "Б.Браун Медікал Україна"

м. Київ 03067, бул. В. Гавела, 4,

БЦ «Сільвер Центр» тел./факс: (044) 351-11-30

e-mail: info.bbmua@bbraun.com

www.bbBraun.ua



Програма B. Braun NuTRIscreen доступна для завантаження у App Store



Для отримання додаткової інформації, будь ласка, скануйте QR-код або відвідайте:
www.nutrition-partner.com